



ES



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Teléfono: 05431/9416-0
Fax: 05431/9416-66
Web: www.rebotec.de
Correo electrónico: info@rebotec.de



BA-Nr.: 05.05.133/2021-07-A01

Manual de instrucciones

Andadores

Yano-Walker	
REF	188.99.10
	150 kg



Representación similar




El manual de instrucciones **debe leerse antes del primer uso** y seguir manteniéndose disponible para el usuario y para usos posteriores, así como adjuntarse en caso de reventa.



Índice de contenidos

1. Descripción del artículo..... 3	14. Recambios y accesorios.....9
1.1. Introducción.....3	
2. Características de rendimiento 3	15. Esquemas y dimensiones.....10
2.1. Finalidad de uso3	
2.2. Uso.....3	
2.3. Almacenamiento y transporte.....3	
2.4. Equipamiento y funciones4	
2.5. Embalaje.....4	
2.6. Desechamiento4	
3. Símbolos y placas de características..... 4	
4. Indicaciones de seguridad 4	
5. Comunicación de incidencias 5	
6. Garantía..... 5	
6.1. Reclamaciones5	
7. Reutilización, vida útil..... 6	
8. Volumen de suministro..... 6	
9. Preparación para el uso 6	
9.1. Emplazamiento del carrito6	
9.2. Ajuste de la altura del manillar6	
9.3. Ajuste de la longitud de los antebrazos6	
9.4. Ajuste del ángulo del reposabrazos.....7	
10. Datos del producto..... 7	
11. Manejo del artículo..... 7	
11.1. Preparación para la marcha7	
11.2. Desplazamiento del artículo.....7	
11.3. Sistema de frenado7	
11.4. Plegado del artículo7	
12. Solución de fallos..... 8	
13. Cuidados y mantenimiento..... 8	
13.1. Cuidados8	
13.2. Mantenimiento8	

1. Descripción del artículo

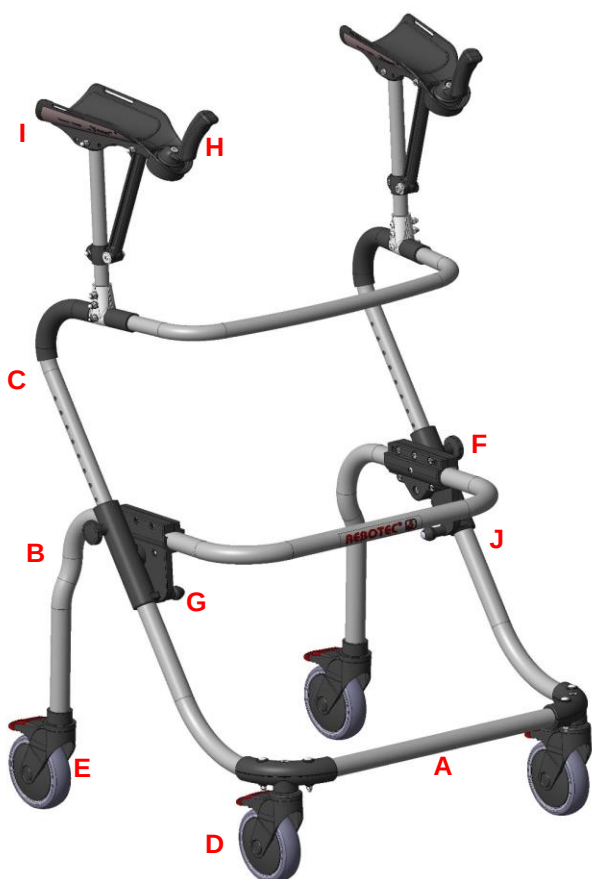

La figura muestra:

A	Estribo de la rueda delantera
B	Estribo de la rueda trasera
C	Manillar
D	Rueda delantera con freno de retención
E	Rueda trasera con freno de retención
F	Empuñadura de estrella, ajuste de la altura
G	Dispositivo de plegado/enganche
H	Empuñadura estándar
I	Base para el antebrazo
J	Placa de características

1.1. Introducción

- El artículo que se describe aquí es un producto sanitario de la clase de riesgo I en conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 MDR.
- En este manual de instrucciones encontrará información e indicaciones relativas a la puesta en funcionamiento, el uso, el mantenimiento y el cuidado del artículo.
- Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el artículo. Cumpla con las indicaciones de seguridad y actúe en conformidad con ellas.

2. Características de rendimiento

2.1. Finalidad de uso

- El producto tiene fines de descarga en caso de limitaciones de las extremidades inferiores. Permite al usuario ejercer la movilidad según desee. Para un uso seguro, deberá contarse con una musculatura del tronco suficiente. Es posible el uso con limitaciones en las manos. No pueden utilizar este artículo personas con alteraciones sensoriales.

Especificación:

- Peso máximo del usuario: 150kg
- Ajustable en altura
- Es posible el uso con reumatitis/artritis en el área de las manos
- Uso en interiores

Indicación

- Limitaciones de la movilidad en caso de afecciones del movimiento/equilibrio, manteniendo una capacidad de marcha/coordinación suficientes, si no basta con el uso de otros medios auxiliares para caminar.
- Para sostener/apoyar/asegurar al caminar, con apoyo adicional para las actividades cotidianas.
- En caso de uso en interiores, deberá contarse con un espacio de vivienda lo suficientemente espacioso.

2.2. Uso

- Rango de temperaturas: De -10°C a 35°C Deberá evitarse la radiación de calor directa sobre el artículo.
- Humedad del aire: 40% - 85%. El artículo solo deberá usarse brevemente si no se halla en estas condiciones.
- Posibilidad de plegarlo para su transporte o almacenamiento.
- No deberán transportarse objetos pesados con el artículo.
- Deberá haber una superficie de apoyo plana del tamaño suficiente. Véase 15.

2.3. Almacenamiento y transporte

- Rango de temperaturas: De +5°C a +25°C. Deberá evitarse la radiación de calor directa sobre el artículo.
- Almacene el artículo en un lugar seco con una humedad del aire máxima del 65%.

2.4. Equipamiento y funciones

- Plegable
- Freno de retención
- Ajustable en altura en 10 posiciones


2.5. Embalaje

- Le recomendamos guardar el embalaje interior para otros fines de transporte más adelante.
- Dimensiones: 780mm x 480mm x 840mm

2.6. Desechamiento

- El desechar y el reciclaje de productos y embalajes usados deberá cumplir con las disposiciones vigentes. Pida información a su empresa de desechar de residuos.
- Debe cumplirse la Ley de protección contra infecciones.
- Tenga en cuenta las identificaciones en los materiales del embalaje y actúe en conformidad con ellas.

3. Símbolos y placas de características

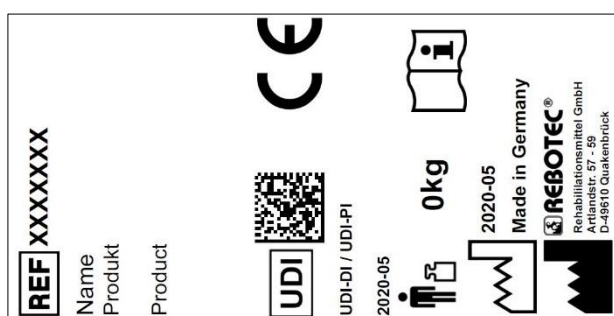

Representación similar.

¡No debe retirarse la placa de características!
Para encargar recambios y tramitar reclamaciones se necesitan el nombre del producto, el número de serie y el año de construcción.

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	¡Lea las instrucciones!		Año de construcción producto
	Número de serie		¡Información importante!
	Número de artículo		Peso máximo del usuario en kg

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Indicaciones de cuidado		Indicaciones de mantenimiento
	Uso solo en interiores.		Fabricante
	Señal visual		Idioma
	¡Lea el manual de instrucciones!		No desechar con la basura doméstica.
	El producto cumple con el Reglamento (UE) 2017/745 MDR.		
	¡Precaución! Cumpla con las indicaciones de seguridad.		
	Unique Device Identifier (Datos: GTIN / LOTE (NS) / año de construcción)		
	Identificación de dispositivos sanitarios El artículo es un producto sanitario.		

4. Indicaciones de seguridad



Cumpla con las siguientes indicaciones de seguridad:

- Antes de la primera puesta en funcionamiento, deberá leerse el manual de instrucciones completo, con el fin de evitar daños por un mal manejo o peligros.
- Antes de cada puesta en funcionamiento, compruebe que no haya daños reconocibles en el artículo.
- En caso de averías funcionales o daños de cualquier tipo, no deberá utilizarse el artículo.

¡Precaución, peligro de caídas!

- Es imprescindible verificar los siguientes puntos antes del uso:
 - Estabilidad del artículo.
 - Funcionamiento de los frenos.
 - Bloqueo correcto del mecanismo de pliegue.
 - Asiento fijo de las empuñaduras de estrella.
- Usar solo el artículo completamente montado.
- No dejar caer sin precaución sobre el artículo.

- El ajuste de la altura debe utilizarse siempre dentro de los orificios previstos para ello.
- Evite desplazarse por suelos resbalosos o desiguales.
- Preste atención a que al menos 2 frenos se pongan en vertical siempre en posición en el momento anterior al uso del artículo. Suelte los frenos únicamente cuando esté en una posición estable y segura.
- Comience caminando y desplazándose cuando esté en una posición vertical y haya agarrado las asas con las dos manos.
- Camine siempre dentro del armazón del artículo y no lo desplace demasiado hacia adelante, pues de lo contrario se eleva el peligro de caídas por una carga incorrecta.
- No podrán utilizar el artículo sin supervisión usuarios que tiendan a acciones o movimientos incontrolados.

¡Precaución, peligro de resbalamiento!

- No agarre las asas con las manos mojadas, pues de lo contrario podría resbalarse y perder la sujeción.

¡Precaución, peligro de vuelco!

- Evite transitar por cuestas muy escarpadas; de lo contrario, podría perder el control del artículo rodante.
- No suba escaleras o peldaños con el artículo.
- No cuelgue ningún objeto del artículo.
- No se incline demasiado sobre el manillar.
- Debe evitarse el inclinarse demasiado sobre el artículo.

¡Precaución, peligro de rotura!

- Tenga en cuenta el peso del usuario permitido (2.1).
- El artículo no es un medio de transporte de objetos pesados.
- No se suba al artículo.
- El artículo no es apto para el transporte de personas.
- No exponga el artículo a cambios bruscos de temperatura (2.2 & 2.3).

¡Precaución, peligro de atrapamiento!

- Peligro de atrapamiento con todas las piezas móviles del artículo. Al plegarlo y desplegarlo, preste especial atención a que no haya ninguna

parte del cuerpo ni ningún objeto situado entre las piezas móviles.

¡Precaución, peligro de lesiones!

- Peligro de lesiones en caso de temperaturas de las superficies de $> 40^{\circ}\text{C}$. Por ello, no exponga el artículo a temperaturas demasiado altas (ej. radiación solar, radiadores, agua caliente). Deje enfriar el artículo antes de usarlo.



Si utiliza el artículo un usuario con insensibilidad cutánea (no percepción de la temperatura o daños en la piel), el personal de cuidados deberá llevar a cabo un control de la temperatura (por ejemplo, tocando con el dorso de la mano).

5. Comunicación de incidencias

- Las incidencias graves en relación con el artículo deberán comunicarse al fabricante y al BfArM (Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios de Alemania) a la mayor brevedad posible.
 - BfArM: www.bfarm.de/DE
 - Use las funciones de comunicación y los formularios.
 - Fabricante: pms@rebotec.de

6. Garantía

- El artículo cuenta con una garantía del fabricante de 12 meses. Los requisitos son cumplir con las Condiciones Generales (www.rebotec.de/agbs) y usar el producto conforme a lo previsto. Se aplican las disposiciones de garantía legales.
- Los cambios realizados por cuenta propia en este artículo conllevarán la pérdida de la conformidad del producto y de la garantía.

6.1. Reclamaciones

- Póngase en contacto con nosotros antes de efectuar una devolución.
- Para reducir los daños de transporte, utilice siempre que sea posible el embalaje original.
- Debe cumplirse la Ley de protección contra infecciones.
 - Asegúrese de que el artículo no provoque ningún peligro de infección al devolverlo.
 - Identifique el artículo como intacto con la hoja informativa adjunta.
 - Es posible que se apliquen costes para las devoluciones no identificadas como intactas.

7. Reutilización, vida útil

- El artículo es reutilizable. El número de usos dependerá de la intensidad y la forma de uso del artículo.
- Antes de un nuevo uso, deberá higienizarse el artículo y verificarse y restablecerse en caso necesario su seguridad técnica y funcional. Véase 13.
 - Encontrará más información en el manual de preparación (05.11.155) y en el manual de mantenimiento (05.11.149).
 - Los documentos pueden descargarse a través del siguiente enlace.
 - www.rebotec.de/downloads
- La vida útil del producto es de 3 años en caso de uso conforme a lo previsto. La vida útil efectiva puede variar dependiendo de la intensidad del uso y de su estado general.


8. Volumen de suministro

- Yano-Walker
 - Manual de instrucciones (05.05.133)
 - Empuñadura estándar
 - Empuñadura elíptica
 - Empuñadura de paleta
- Puede encargar el manual de preparación y de mantenimiento o consultarlos y descargarlos en www.rebotec.de/downloads.

9. Preparación para el uso

- El artículo se ha revisado de fábrica en relación con los posibles fallos y su integridad. Revise el artículo a su recepción para detectar posibles daños que se hayan producido durante el transporte y comprobar que el volumen de suministro esté completo. Deberá efectuar el montaje y ajuste el vendedor especializado.


9.1. Emplazamiento del carrito

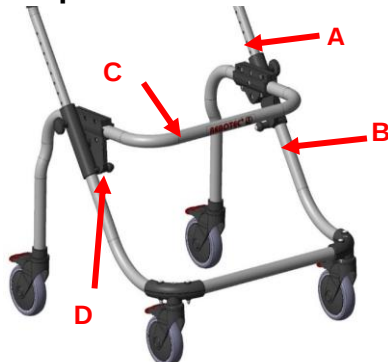

- Saque el estribo del larguero de agarre y el armazón de las ruedas de la caja de cartón.
- Coloque el carrito sobre las ruedas y despléguelas totalmente presionando el estribo de la rueda trasera (C) hasta que se haya encajado el enganche (D). Compruebe que el carrito se halle completamente desplegado y con el seguro de pliegue bloqueado.
- Inserte el manillar (A) con las bases para los antebrazos en la horquilla de la rueda delantera (B).

9.2. Ajuste de la altura del manillar

- La altura de la base para el antebrazo se adapta a su estatura a través del larguero de agarre ajustable en altura.
- Suelte y extraiga los dos tornillos con empuñadura de estrella (A).
- Ajuste el larguero de agarre (B) a la altura deseada. Coloque los orificios de encaje en la cubierta y vuelva a apretar firmemente con el tornillo en estrella.

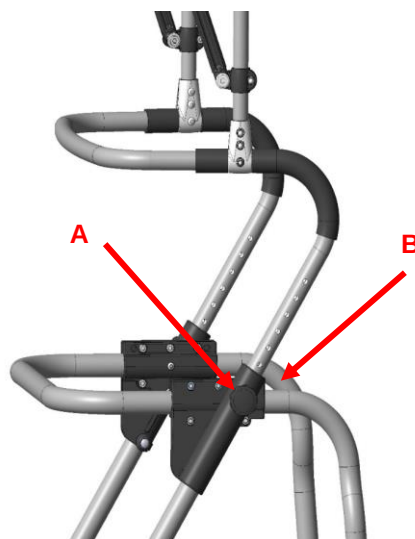

9.3. Ajuste de la longitud de los antebrazos


- Para el ajuste de la longitud de los antebrazos, hay tres posibilidades de ajuste (A= normal/B= corto/C= largo).
- Suelte la tuerca de sombrerete con una llave de tuercas SW10, desatornille y saque el tornillo por completo.

- Seleccione el ajuste, inserte el tornillo y vuelva a atornillar firmemente la tuerca de sombrerete.



9.4. Ajuste del ángulo del reposabrazos

- Mediante el ajuste de la inclinación variable del reposabrazos, es posible adaptar la posición del antebrazo.
- Suelte un poco el tornillo (1) en el manguito de fijación (2) de la horquilla de apoyo con la llave hexagonal de 4mm.
- Desplace el reposabrazos a la posición deseada manualmente (inclinación máx. ajustable hasta el tope (B)).
- Vuelva a apretar firmemente el tornillo (1).

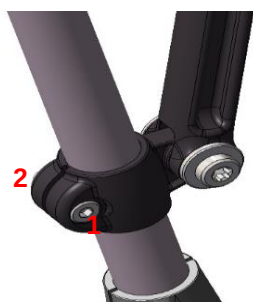

10. Datos del producto

- Quedan reservados los cambios con respecto a la realización mostrada en el presente manual de instrucciones debidos a avances técnicos.
- Véase 15.

Rango		Indicación
Yano-Walker		
2.	Peso del producto*	10,6kg
3.	Peso total*	13,4kg
Tolerancia de la piel		DIN EN 10993-1/-5
Inflamabilidad**		DIN EN 1021-1/-2

*Sin accesorios.

**Ignífugo: Los artículos de material PUR.

11. Manejo del artículo

- Debe asegurarse que el artículo se encuentre en un estado de uso correcto antes de usarlo. Si se detectan defectos o fallos de funcionamiento, no

podrá utilizar el artículo. Pida a un vendedor especializado que solucione el defecto antes de usarlo.

11.1. Preparación para la marcha

- El artículo deberá desplegarse y los pestillos deberán estar encajados. Compruebe la estabilidad y el funcionamiento de los frenos de retención.

11.2. Desplazamiento del artículo


- Camine siempre por el interior del artículo y no se desplace demasiado hacia adelante.
- No se incline demasiado sobre las bases para los antebrazos.
- Al utilizar el artículo en interiores, no se desplace contra umbrales de puertas, y preste atención a los revestimientos de suelos lisos o no firmes.
- Los cuatro frenos de retención deberán estar soltados al caminar.

11.3. Sistema de frenado

Un uso incorrecto del freno puede provocar situaciones inseguras y daños (desgaste elevado, limitación de las funciones).

Freno de retención (1)

- El artículo no deberá manejarse si los frenos están apretados o las ruedas bloqueadas.

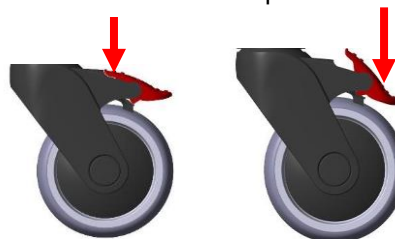

- Presionando hacia abajo (A) la palanca roja se bloquea la rueda y, presionando la palanca hacia arriba (B), se vuelve a soltar el freno. Si no está bloqueada, la rueda puede girarse en 360 grados.


11.4. Plegado del artículo

Despliegue

- Coloque el artículo sobre las ruedas y presione el bastidor hacia abajo. Deberá estar encajado el seguro de plegado por completo.

Pliegue

- Extraiga por completo los dos enganches y atraiga el estribo del tubo (B) hacia sí.

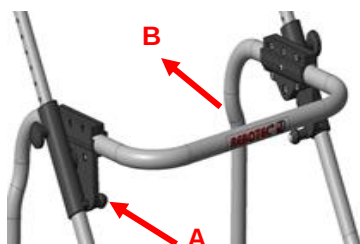

12. Solución de fallos

Fallo	Posible causa	Remedio
Marcha difícil al girar las ruedas	Depósitos	Limpieza, control periódico
Perno de bloqueo encajado	Depósitos	Limpieza, Cambiar perno de bloqueo
Falta de funcionamiento de los frenos	Función defectuosa	¡Mantenimiento! Cambiar el artículo
Juego de las ruedas torcido	Choque contra un obstáculo	¡Mantenimiento! Cambio
Desgarros o roturas visibles	Distintas causas	¡Mantenimiento! Cambio
Base para el antebrazo defectuosa	Desgaste, deterioro	Cambio de las piezas defectuosas
Conexiones atornilladas aflojadas	Desgaste, deterioro	Comprobación de las conexiones y cambio en caso necesario

13. Cuidados y mantenimiento

13.1. Cuidados



Utilice productos de limpieza y desinfectantes convencionales suaves. Después de la limpieza, límpiolo con agua clara a posteriori y seque el artículo con un trapo.

- No utilice productos abrasivos o productos de limpieza con componentes agresivos (ácidos, diluyentes) ni objetos de limpieza duros (cepillos), pues de lo contrario pueden dañarse las superficies o formarse depósitos en los materiales.
- El artículo puede limpiarse y desinfectarse manualmente. Cumpla con el manual de preparación (05.12.155).

13.2. Mantenimiento

- Un desgaste o un manejo indebido no reconocido a tiempo o la ausencia o irregularidad de las revisiones pueden causar accidentes.



Por motivos de seguridad, el artículo deberá revisarse correctamente **al menos 1x al año**.

Revisión de daños visibles en el artículo (desgarros, roturas, piezas sueltas)

- Verifique la estabilidad antes del uso.

Mantenimiento/extensión de la inspección

- El mantenimiento debe incluir los siguientes trabajos de inspección y documentarlos.
- Control visual de daños, desgaste y corrosión de todas las piezas del bastidor, como:
 - Armazón
 - Manillar
 - Apoyos para los antebrazos
 - Ruedas delanteras (cambiar por pares)
 - Ruedas traseras (cambiar por pares)
- Inspección de la integridad, el asiento y el funcionamiento de todos los elementos de conexión (tornillos, tuercas)
- Funcionamiento del mecanismo de pliegue
- Funcionamiento del ajuste de la altura
- Funcionamiento de los frenos (freno de retención)
- En caso de daños o reparaciones pendientes, póngase en contacto con el vendedor especializado de inmediato.
- **No** lleve a cabo cambios en el artículo por cuenta propia. Esto puede afectar a la seguridad y al funcionamiento del artículo. **REBOTEC no asumirá responsabilidad alguna por ello.**
- En caso de reparación, solo deberán utilizarse recambios del fabricante. Véase 6.
- Después de una revisión o una reparación, limpie el artículo antes de utilizarlo.
- Preste atención a los puntos 7 y 14.
- *Cumpla con el manual de mantenimiento (05.11.149)*

14. Recambios y accesorios




N.º	N.º art.	Denominación
1	288.10.45	Rueda delantera con freno de retención, compl.
2	288.10.46	Rueda trasera con freno de retención, compl.
3	853.06.40	Empuñadura de estrella completa
4	213.10.36	Almohadilla para el reposabrazos, negra
-	164.30.00	Set del soporte para bastón
-	05.05.133	Manual de instrucciones
-	05.11.149	Manual de mantenimiento



Utilice únicamente recambios y accesorios de REBOTEC para garantizar un funcionamiento seguro y sin problemas.

15. Esquemas y dimensiones

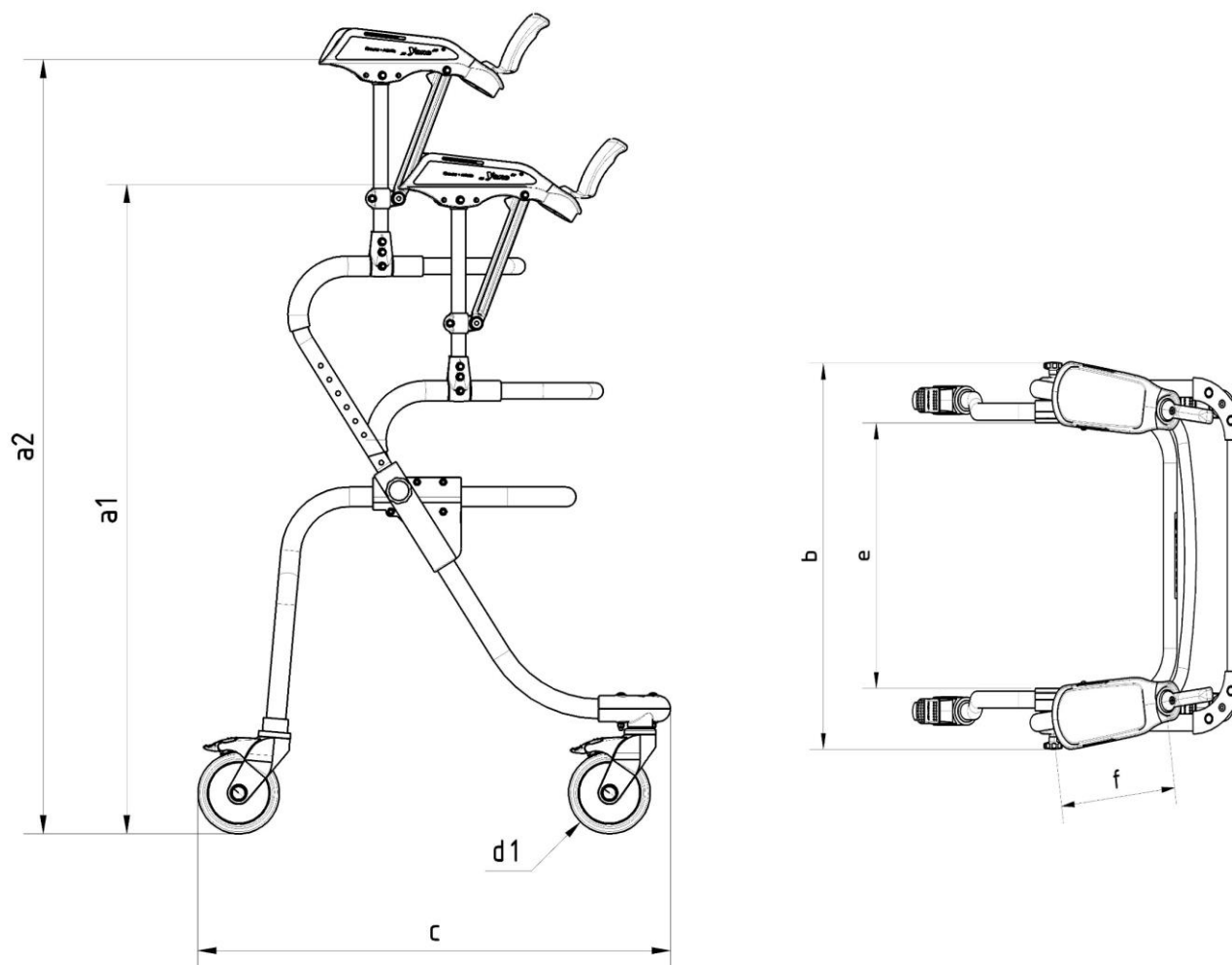

N.º	Denominación	Modelo S / dimensiones en mm
a1	Altura mín.	980
a2	Altura máx.	1160
b	Anchura	680
c	Longitud	720
d	Diámetro de la rueda delantera	125
e	Diámetro de la rueda trasera	125
f	Longitud total/Base para los brazos	260
bxc	Superficie de apoyo	680 x 720



Las dimensiones y el peso pueden variar en función del equipamiento. Pueden darse diferencias menores debido a las tolerancias de fabricación. Quedan reservadas las modificaciones.





ES



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
D-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Teléfono: 05431/9416-0
Fax: 05431/9416-66
Web: www.rebotec.de
Correo electrónico: info@rebotec.de



El manual de instrucciones **debe leerse antes del primer uso** y seguir manteniéndose disponible para el usuario y para usos posteriores, así como adjuntarse en caso de reventa.